
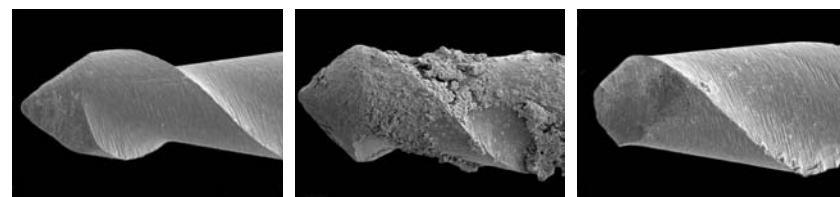


Ger effektivare och säkrare smittrening

- lite gods på brickan
- stora hål i botten
- instrument som ligger fritt även i säkrat läge


Egenskaper som gör att vattenstrålar kommer åt överallt i diskdesinfektorn samt underlättar ångpenetration för att uppnå effektiv sterilisering.

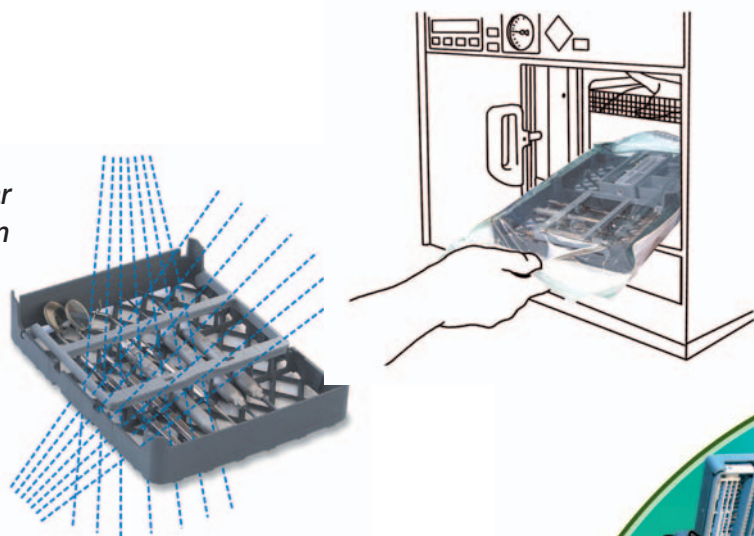

Fabriksny fil Använd fil Fil rengjord i PractiPal
(Bilderna tagna med svepelektronmikroskop vid Huddinge Universitetssjukhus.)

Organiserar dina instrument

- praktiska moduler för borrh, rotkanalsfiler och handinstrument
- anpassas till en mängd användningsområden

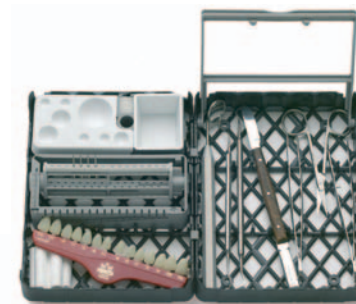


Protetik




Hygienistbricka



Polering

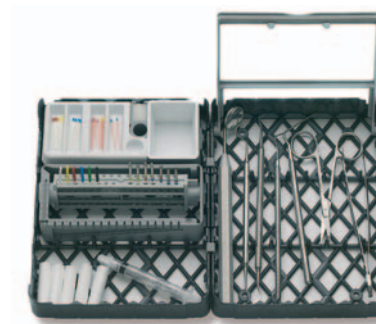



Endodonti

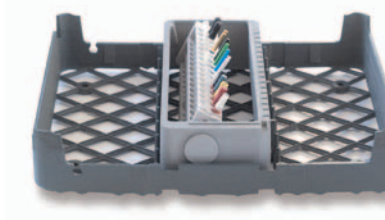

Endast rotkanalsfiler

Sparar tid på kliniken

- standarduppsättningar redan på plats
- minskat plock under hela rengöringsprocessen med instrumenten kvar i ställ och på bricka

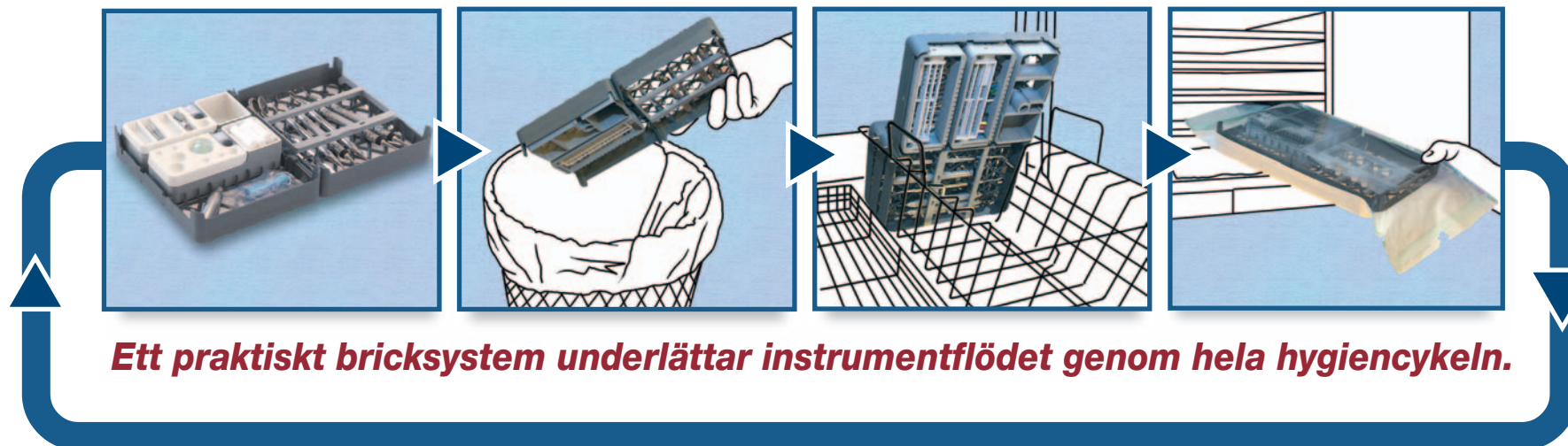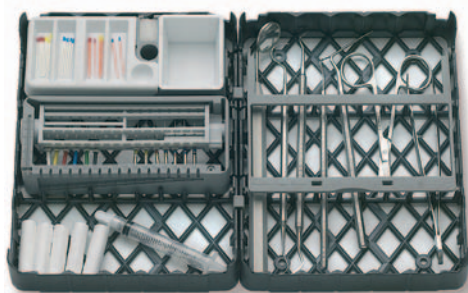

Ett praktiskt bricksystem underlättar instrumentflödet genom hela hygiencykeln.

Minskar risken för stick och skärskador

- brickans höga kant skyddar mot spetsiga föremål
- instrumenten hålls säkert på plats



PRACTIPAL™ CLAMP TRAY


- Brickorna kan fästas ihop.
- Två brickor får plats i en standardkassett.
- Plats för 9 instrument, maximalt 12 mm i diameter och 172 mm i längd.
- I säkrat läge kan instrumenten inte slå mot varandra, vilket hindrar friktionsskador.



PRACTIPAL™ BUR/ENDO STAND

Används antingen för borrar eller rotkanalsfilar.

- Plats för 16 borrar (8 FG, 4 långa HP/RA, 4 korta HP/RA eller 4 långa FG).
- Plats för 29 rotkanalsfilar.
- Lätt att sätta tillbaka rotkanalsfilar.
- Lätt överblick över vilka borrar eller rotkanalsfilar som bör bytas ut.
- Förhindrar stick- och skärskador i säkrat läge.
- Kan användas på brickan eller separat.

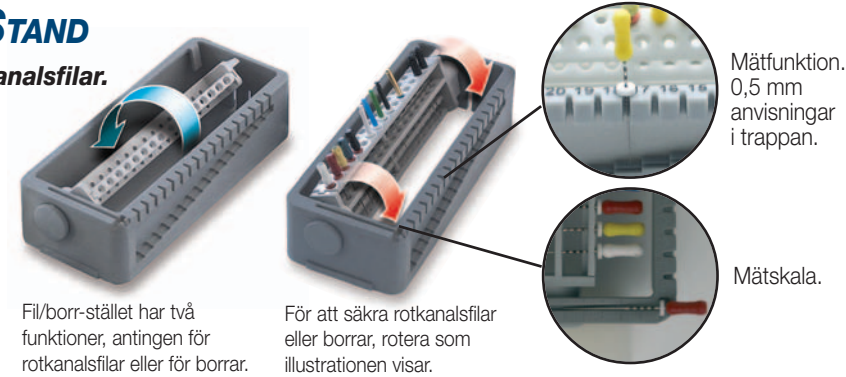

Fil/borr-stället har två funktioner, antingen för rotkanalsfilar eller för borrar.

För att säkra rotkanalsfilar eller borrar, rotera som illustrationen visar.

Mätfunktion. 0,5 mm anvisningar i trappan.

Mätskala.

PRACTIPAL™ MULTIBLOCK

MultiBlock

Används tillsammans med engångsprodukterna.



Multi Dish Pallet

Flertalet koppar för alla behov. Tillräckligt mellanrum mellan kopparna.



Point Pallet

Unik kombination av flertalet medikamentkoppar och dappen.



Foam

Unik öppning för att dra bort debris från rotkanalsfilare och instrument. Debrisen dras bort i stället för att tryckas upp på instrumentet.

Waste Container

För avfall och att skrapa rent instrument. Kan också användas som medikamentkopp eller uppläggs-skål för bomullsrullar och tork.

Needle recapper


Plats för kanylhylsa. Ingen stickrisk när kanylhylsan ska sättas tillbaka på kanylen.

Tray	Glasfiberförstärkt PPS	☑	☑
Clips	Polyamid	☑	☑
Clamp	Glasfiberförstärkt polyamid	☑	☑
Bur/Endo Stand	Polyamid	☑	☑
Multi Block	Polyamid	☑	☑
Multi DishPallet*	Polypropen - PP	☑	☑
Point Pallet*	Polypropen - PP	☑	☑
Waste Container*	Polypropen - PP	☑	☑
Foam*		☑	☑

* avsedda för engångsbruk men kan autoklaveras en gång

Alla moduler är tillverkade i hållbar plast som inte korroderar eller stjälar värme under smittrengningsprocessen.

PRACTIPAL™ TRAYS

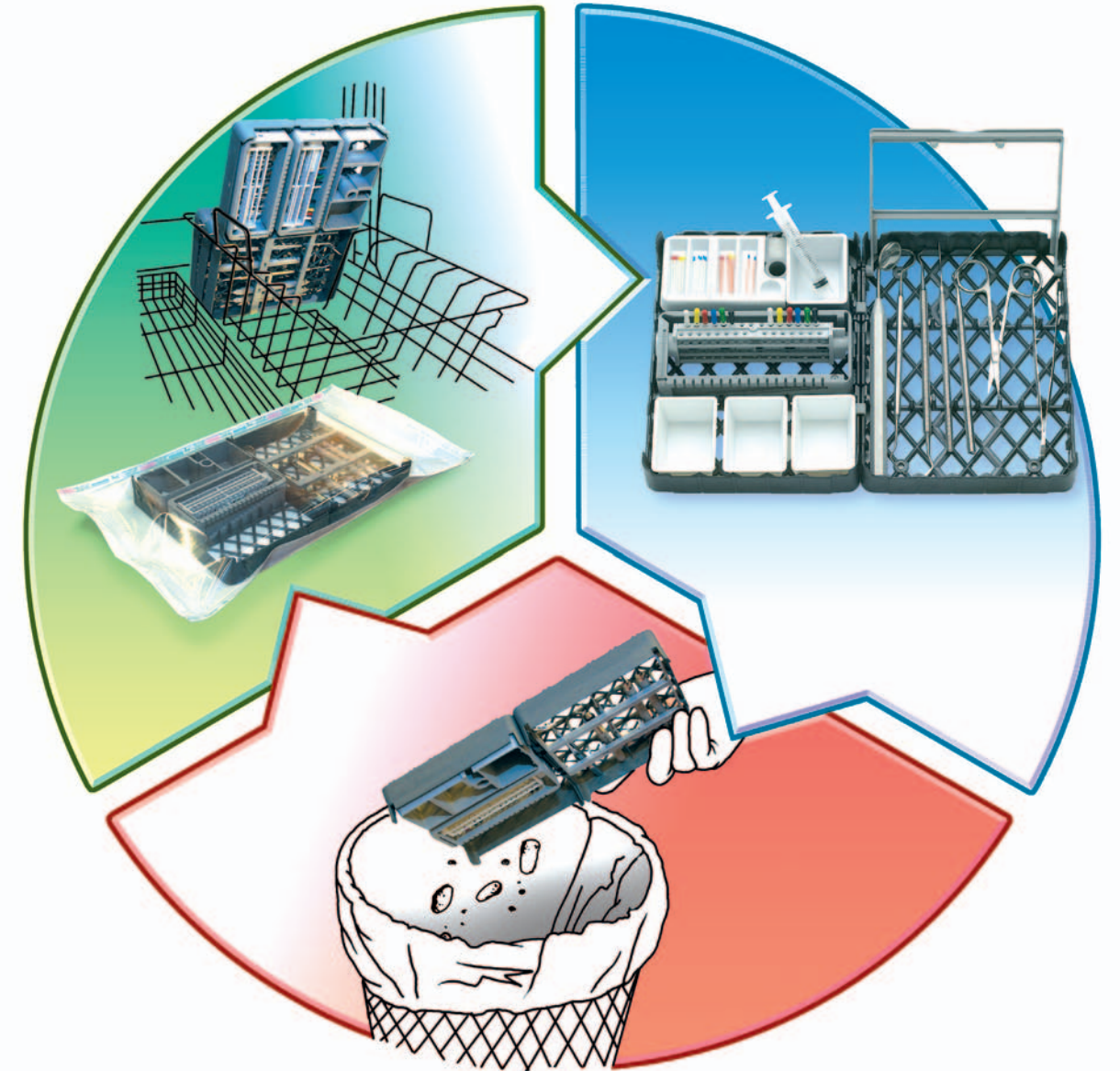

SDI DIRECTA

Design by Dentists

www.sdidirecta.com

PRACTIPAL™ TRAYS

SVENSKA DENTAL INSTRUMENT AB
P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75, Fax: +46 8 590 306 30

SDI DIRECTA

www.sdidirecta.com

Design by Dentists